


## HOW TO USE YOUR PROFESSIONAL WRISTBAND


The Professional Wristband contains a carbon strip that allows you to switch from personal to professional mode automatically. This is especially important when  $+/-$  is in function. The Professional Wristband is recommended for aestheticians' use.

### DIRECTIONS


1. Plug the connecting rod into the Wristband.

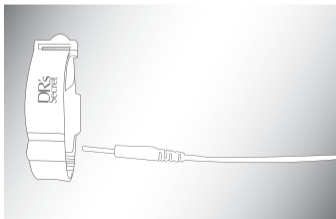

2. Connect the Professional Wristband to DR's Secret LIF.

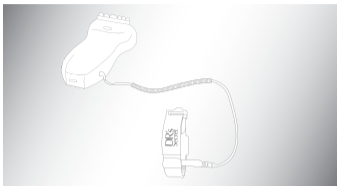

3. Allow your customer to put on the Wristband before treatment.

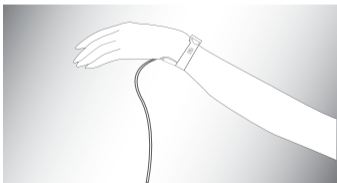

4. Remove the Professional Wristband after treatment.

## 프로페셔널손목밴드 사용법


프로페셔널손목밴드는 탄소가 들어있어 개인모드에서 전문가용 모드로 자동 전환합니다。

+/- 기능이 있을 때 특히 중요합니다。


프로페셔널손목밴드는 피부관리사가 사용하기를 추천합니다。

### 방법


1. 연결케이블을 손목 밴드에 꽂으세요。

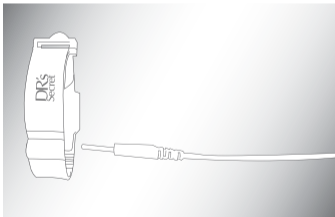

2. 프로페셔널손목밴드를 닥터시크릿리프트에 연결하세요。

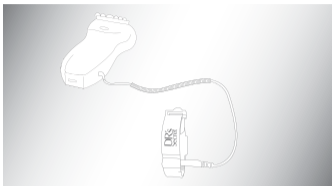

3. 처치 전 소비자가 손목 밴드를 손목에 착용하도록 하세요。

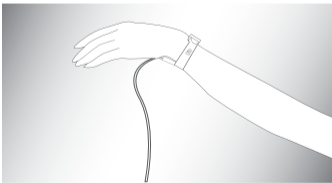


4. 처치 후 프로페셔널손목밴드를 제거하세요。

## 如何使用您的专业手环


专业手环内镶有炭片，便于您于个人模式和专业模式之间进行转换。此手环是为 **+/-** 而设。此专业手环推荐美容师使用。

### 如何使用


1. 将金属头插入手环。

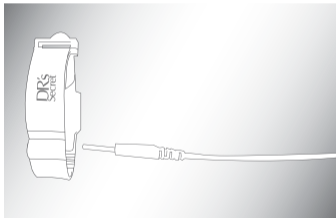

2. 将金属头的另一端与皙之密丽肤仪连接。

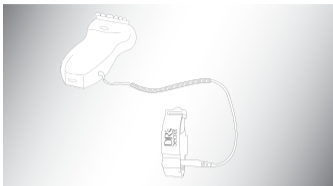

3. 开始保养程序前，将手环佩戴于顾客的手腕上。

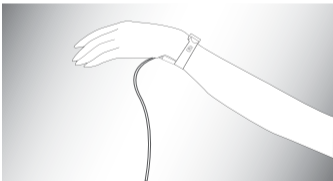


4. 保养程序完毕，请将手环取下。

## 如何使用您的專業手環


專業手環內鑲有炭片，便于您于個人模式和專業模式之間進行轉換。此手環是為 $\pm$ 而設。此專業手環推薦美容師使用。

### 如何使用


1. 將金屬頭插入手環。

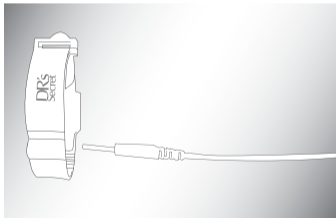

2. 將金屬頭的另一端與哲之密麗膚儀連接。

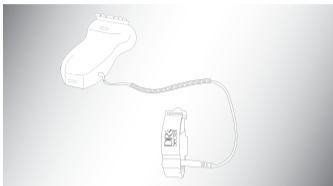

3. 開始保養程序前，將手環佩戴于顧客的手腕上。

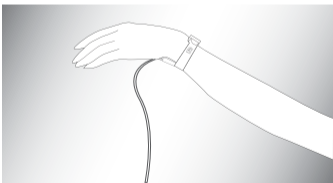

4. 保養程序完畢，請將手環除下。




## CARA PENGGUNAAN GELANG PROFESIONAL


Gelang Profesional mengandung strip karbon yang membolehkan Anda beralih dari mod peribadi ke mod profesional secara automatik. Peralihan ini sangat penting apabila  $+/-$  berfungsi. Gelang Profesional direkomendasi untuk kegunaan ahli estetika.

### CARA PENGGUNAAN


1. Pasangkan batang penyambung ke gelang.

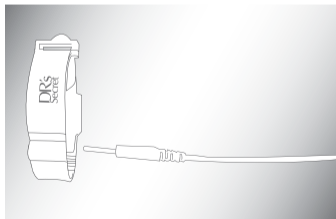

2. Sambungkan gelang profesional ke DR's Secret LIF.

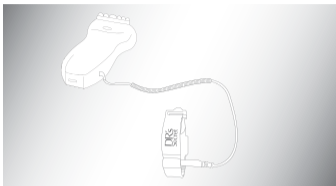

3. Persilakan pelanggan Anda memakai gelang sebelum rawatan.

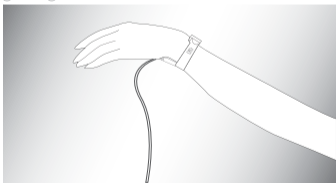


4. Tanggalkan gelang profesional setelah rawatan.

## CARA MENGGUNAKAN GELANG PROFESIONAL


Gelang Profesional mengandung strip karbon yang memungkinkan Anda beralih dari mode pribadi ke mode profesional secara otomatis. Peralihan ini sangat penting ketika  $+/-$  berfungsi. Gelang sangat direkomendasikan untuk penggunaan estetika.

### CARA PENGGUNAAN


1. Pasang batang penghubung ke gelang.

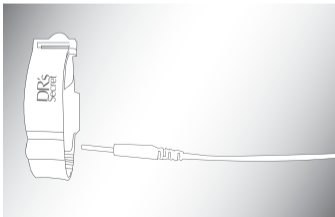

2. Hubungkan gelang profesional ke DR's Secret LIF.

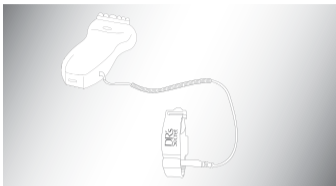

3. Persilakan pelanggan Anda mengenakan gelang sebelum perawatan.

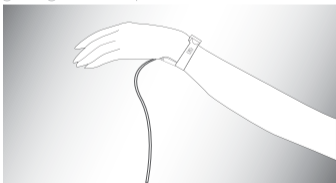


4. Lepaskan gelang profesional setelah perawatan.

## CÁCH SỬ DỤNG DÂY ĐEO CỔ TAY MÁY LIF.


Dây đeo cổ tay thiết kế dành riêng cho máy LIF có dải carbon cho phép bạn chuyển từ chế độ cá nhân sang chế độ chuyên nghiệp một cách tự động. Chức năng này đặc biệt quan trọng khi  $+/-$  bạn sử dụng cho người khác. Dây đeo cổ tay được khuyến khích sử dụng cho thẩm mỹ, spa.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Cắm que nối vào dây đeo cổ tay.

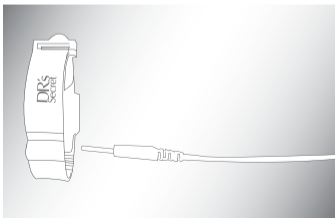

2. Kết nối dây đeo cổ tay với DR's Secret LIF.

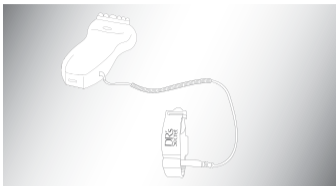

3. Đeo dây vào cổ tay khách hàng trước khi bắt đầu lộ trình.

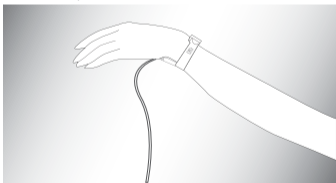

4. Tháo dây đeo cổ tay ra khi đã hoàn thành tất cả lộ trình.